



啟鑫科技/希馬頓科技

最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

最終檢驗規範

客 戶：GCX

品 號：VER-0001-63F

品名：Verathon Titanium Stand

版本	變更日期	變更內容	變更者	審核
A6	2023/2/22	變更F版	Bruce	
A2	2017/10/3	變更為C版	PHILIP	
A3	2017/11/13	更新C版內容	Bruce	
A4	2018/3/14	變更版本為E版	Bruce	
A5	2018/11/30	設變說明書	Bruce	

WI-04A2-CG006-00588



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

PYRAMIDS

Pyramids QC Final Inspection Standard

版本：A6			
PART NAME 品 名	Verathon Titanium Stand	PART NO. 品 號	VER-0001-63F
COLOR 顏 色	VERATHON LIGHT GRAY(GCX-GP26)		

略圖 Illustration:



外觀/功能/組裝規範:

檢驗項目	檢驗工具	檢驗規範	照片
1	目視	確認所有組件有無短少；外觀照啟鑫通則檢驗。	1-1
2	目視	確認VER-0001-02是否與0260-0507-00-10結合，結合處使用262止滑膠，不可轉動	1-2
3	目視	確認VER-0001-04中，FST-0018-07x3pcs是否與VER0001S4Ax1pcs齊平。 RSL0001P1Ax1pcs與RSL0001P2A x1pcs使用FST-0012-25x2pcs鎖入後是否有適當距離。	1-3
4	目視	確認VER-0001-05中，是否有貼上LBL-0074-01與位置是否正確。RS-0008-64x5PCS輪子轉動與煞車是否正常和放置平台使用0.25mm厚薄規檢驗。	2-1
5	目視	確認VER0001P4B是否放在指定位置 檢驗0260-0507-00-10上是否有組裝HDW-0041-12	2-2 2-3
6	目視	確認是否有使用20in-lbs的扭力板手將FST-0052-112x2pcs鎖緊	4-1
7	目視	檢查LBL-0074-02D、LBL-0074-13B、LBL-0074-01D上的編碼是否為:0800-0537，周次號碼是否一致如不一樣需重新印製。	4-2

零附件:

1	目視	零件包VER-0001-63 BAG00內有:DU-0900-4528-01-60 x1pcs、RS-0025-99x1pcs、 WS0001K5Ax1pcs、RSL0001P3Ax2pcs、FST-0012-35 04BAGX4x1pcs、VER0001M4Ax1pcs	3-1
2	目視	零件包FST-0012-35 04BAGX4內有:FST-0012-35(yN) x4PCS	3-2

包裝方式：先將VER-0001-05放入包材後,放入外箱,之後放入VER-0001-04與VER0001S5A在左下角位置,之後再VER-0001-05上方放入VER0001P4與零件包VER-0001-63 BAG00,最後放入VER-0001-02並且貼上標籤,最後封箱秤重並且貼上外箱標籤。



WI-04A2-CG006-00588




啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

版本：A6

附件一

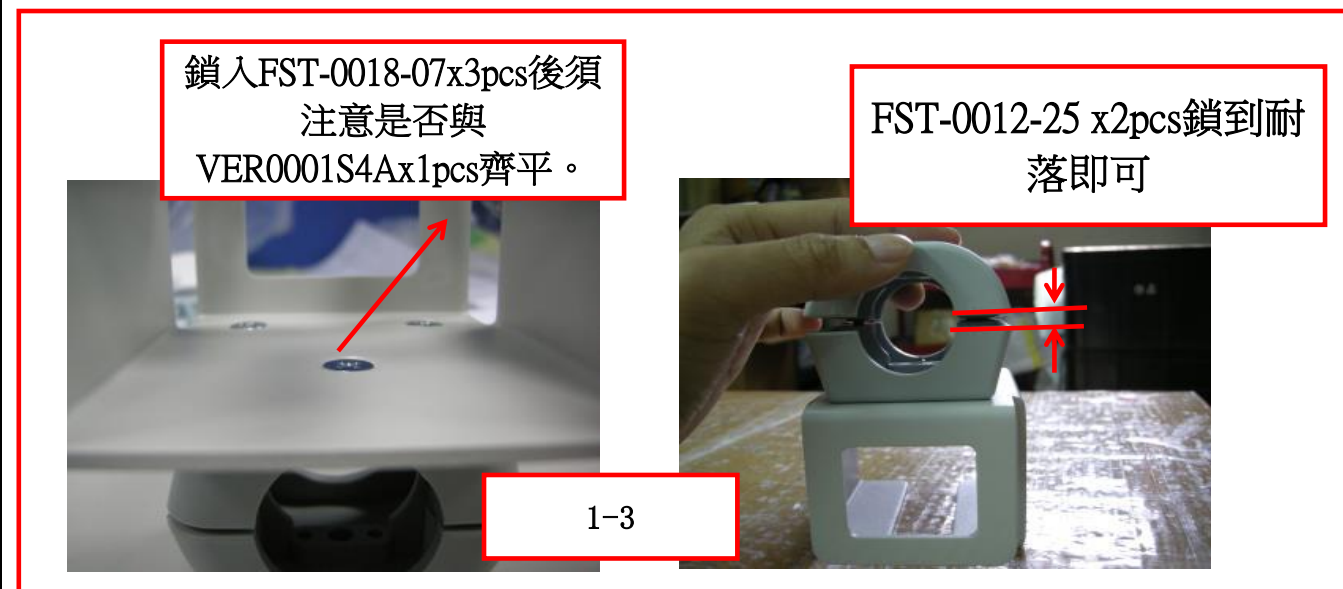




啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範


Pyramids QC Final Inspection Standard

版本：A6

附件二

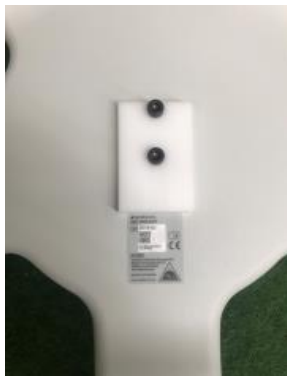

確認VER-0001-05中，是否有貼上LBL-0074-01D與位置是否正確。

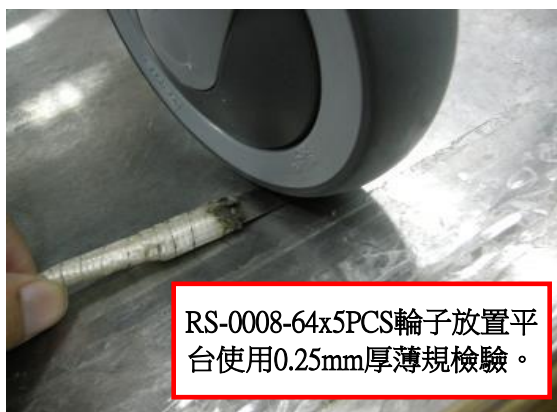

RS-0008-64x5PCS輪子放置平台使用0.25mm厚薄規檢驗。



2-1

RS-0008-64x5PCS輪子煞車是否正確。



VER0001P4B放置位置

2-2



2-3

檢驗0260-0507-00-10上是否有組裝HDW-0041-12



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

版本：A6

附件三



RS-0025-99X1PCS



WS0001K5AX1PCS




VER0001M4A X1PCS



RSL0001P3AX2PCS



FST-0012-35 04BAGX4X1PCS

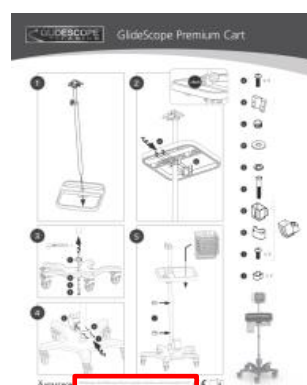

0900-4528-01-60

DU-0900-4528-01-60 X 1PCS



VER-0001-63 BAG00 X1PCS

3-1



FST-0012-35 04BAGX4



FST-0012-35 (yN) X4PCS

3-2



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

版本：A6

附件四



確認是否有使用20in-lbs的扭力板手將
FST-0052-112x2pcs鎖緊

4-1

Verathon Inc.
20001 North Creek Parkway
Boothell, WA 98011 USA
Tel: 1 (800) 333-2333 (USA & Canada)
Tel: +1 (425) 867-1348 Fax: +1 (425) 883-2895
verathon.com

Verathon Medical (Europe) B.V.
Willem Feringastraat 13
1096 BL Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31 (0) 20 210 30 91
Fax: +31 (0) 20 210 30 92

Verathon Medical (Australia) Pty Limited
Unit 9, 39 Herbert Street
St Leonards NSW 2065
Australia
Within Australia: 1800 513 603 Tel / 1800 657 970 Fax
International: +61 2 9431 2000 Tel / +61 2 9475 1201 Fax

MADE IN TAIWAN
0125-2471 03

Verathon P/N: 0800-0537
Revision Number: 02
Box Qty: 1
PO Number: 49581
Lot Number: (If applicable) 2015-12

LBL-0074-13B

GLIDE SCOPE PREMIUM CART
REF: 0800-0537
LOT: 2022-04
MD
CE
MADE IN TAIWAN
0125-2609-01-40
11kg

LBL-0074-01D

LBL-0074-02D

4-2



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

客訴問題記錄

WI-04A2-CG006-00588