



# 啟鑫科技/希馬頓科技

## 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

最終檢驗規範

客 戶： GCX

品 號： GEM-0010-75

品名： Silex Plate Kit, MAC Trolley

版本	變更日期	變更內容	變更者	審核
A1	2013/11/5	第一版	Hank	
A2	2014/4/18	變更附件包位置	ANGELA	
A3	2015/8/20	變更附件包位置	ANGELA	



# 啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

版本：A3			
PART NAME 品 名	Silex Plate Kit, MAC Trolley	PART NO. 品 號	GEM-0010-75
COLOR 顏 色	GEHC Gray N7(GP-03)		

略圖 Illustration:



外觀/功能/組裝規範:

檢驗項目	檢驗工具	檢驗規範	照片
1	目視	檢查外觀有無污損、碰傷、粉體不良	無
2	Calipers	檢查是否有鎖入FST-0002-02(yN) x 2pcs	1-1
3	目視	檢查是否有將LBL-0005-64、LBL-0001-24黏貼於指定位置	1-2
4	目視	檢查GEM-0010-75 BAG00是否有黏貼於指定位置	1-4
5	目視	檢查外箱包裝方式: (1)底層16)+( 2)中層7+(3)上層2=25SET 內盒 / 1外箱.	

零附件:

1	目視	檢查GEM-0010-75 BAG00是否有FST-0007-05(yN) x 2pcs、HDW-0027-03 x 1pcs	1-3

包裝方式：1.將完成的GEM-0010-75 SUB+GEM-0010-75 BAG00放入 P-0002-AK5--05E內並將側邊剩餘的空間對摺後放入內箱 (P-0004-01--17783814318A)，並於中間貼上LBL-0039-29x1pcs。

2.將包裝好的成品內箱P-0004-01--17783814318A)入外箱P-0003-80-486324756B(9S9)，  
包裝方式(1.底層16+ 2.中層7+3.上層2 )=25SET / 1外箱.

3.將外箱P-0003-80-486324756B(9S9)封箱，並於箱外左上角貼上LBL-0039-29+產品標籤，左下角貼上透明PO標籤，  
並於磅秤上秤重紀錄讀值。








# 啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

版本：A3

附件一

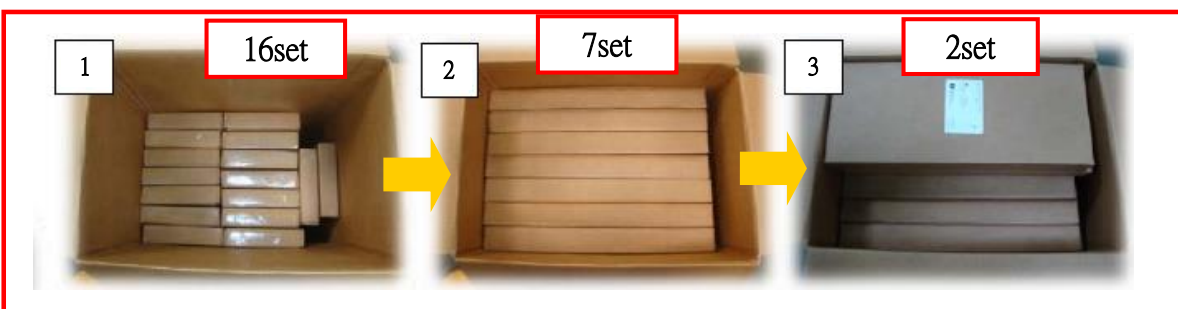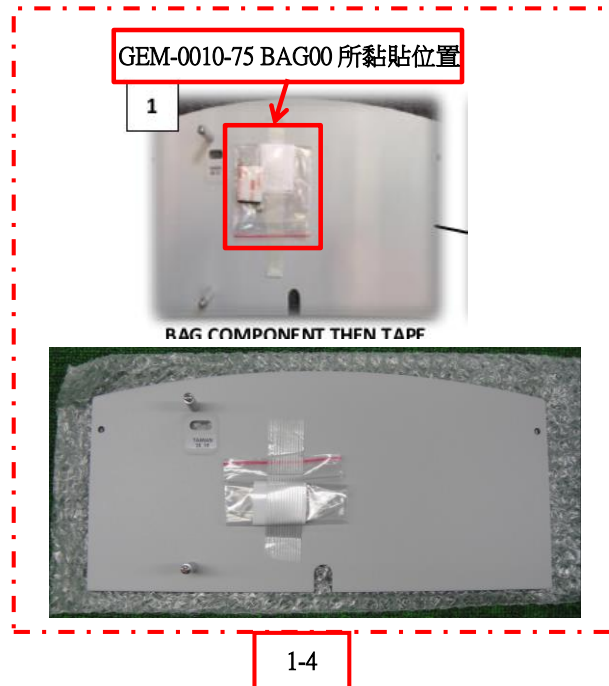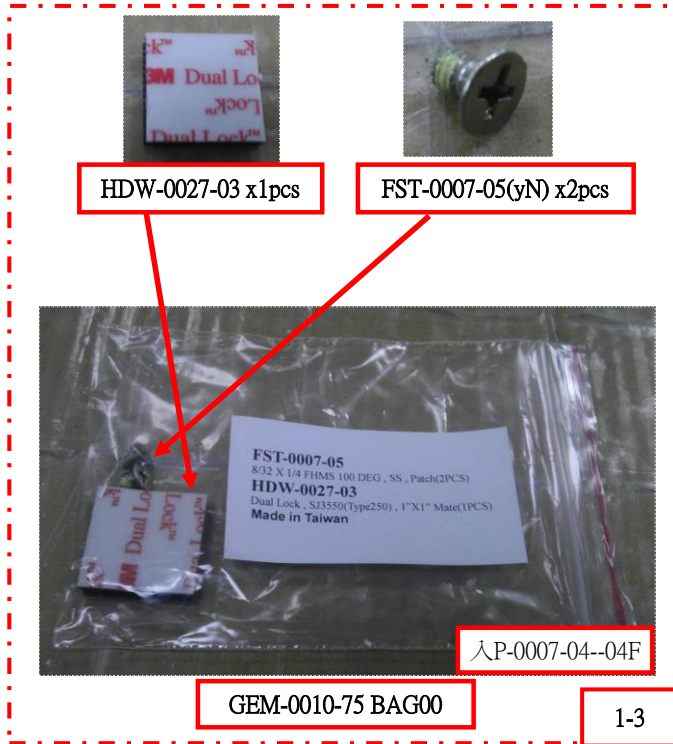



# 啟鑫科技/希馬頓科技

## 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

客訴問題記錄