



# 啟鑫科技/希馬頓科技

## 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

最終檢驗規範

客 戶： GCX

品 號： GEM-0010-61C

品名： Modular MAC Trolley - Partially Assemble

版本	變更日期	變更內容	變更者	審核
A1	2016/3/18	第一版	Bruce	



# 啟鑫科技/希馬頓科技

## 最終檢驗規範

版本：A1	Pyramids QC Final Inspection Standard		
PART NAME 品 名	Modular MAC Trolley - Partially Assemble	PART NO. 品 號	GEM-0010-61C
COLOR 顏 色	GCX LIGHT GREY MUNSELL N7 (GCX-GP03)		

略圖 Illustration:



外觀/功能/組裝規範:

檢驗項目	檢驗工具	檢驗規範	照片
1	目視/扭力板手	檢驗GEM0010M19A長邊是否鎖入RS-0008-29、短邊是否鎖入RS-0008-20，鎖付磅數是否為100in-lbs. RS0002H2A是否正確穿入GEM0010M19A FST-0018-47x4pcs鎖付磅數是否為30in-lbs.	附件一
2	目視	GEM0010M1B-26300依啟鑫五金壓鑄檢驗規範檢驗外觀	附件二
3	目視/扭力板手	檢驗FST-0300-01x1pcs鎖付磅數是否為 5in-lbs. HDW-0033-01x2pcs是否有壓入齊平	附件二
4	目視/扭力板手	檢驗GEM00010P10A使用FST-0011-17x4pcs鎖付磅數是否為 30in-lbs 檢驗GEM0010P2A、GEM0010P3A使用FST-0011-17x4pcs鎖付磅數是否為 30in-lbs	附件二
5	目視/厚薄規	GEM00010P10A與GEM0010P1D組裝完需使用0.03"厚薄規檢驗間隙 檢驗各部位零件是否有漏裝、使用纖維膠帶黏貼GEM0010S3A、GEM0010S1A至GEM0010P1D	附件三
6	目視	檢驗LBL-0002-224C x1pcs是否貼在相關位置、及標籤是否正確 檢驗外箱標籤LBL-0039-14C是否正確。	附件五

零附件:

1	目視	GEM-0010-41B BAG00內有:FST-0028-41(BN) X 4PCS、FST-0028-56(YN) X 4PCS、	附件四
		FST-0051-25(YN) X 4PCS、FST-0013-87(YN) X 2PCS、FST-0007-34(YN) X 2PCS、	
		HDW-0027-02 X 2PCS、HDW-0027-03 X 4PCS、WS0001K8A X 1PCS、	
		DU-2056914-002 REV.Cx1PCS	

包裝方式：1.將P-GEM-0010-61B-54777986Dx3pcs放入P-GEM-0010-61B-800563364B外箱2.再鋪上P-GEM-0010-61B-54777986-2x3pcs3.放上GEM-0010-08 x1pcs後蓋上P-GEM-0010-61B-107648255Dx1pcs，並在左右兩邊放上P-GEM-0010-61B-21289335D然後將包裝好的GEM0010M1B-26300x1pcs放置中間4.將P-GEM-0010-61B-78187811Dx1pcs蓋上去5.最後放上P-GEM-0010-61--1197627D x2pcs再將GEM-0010-20B放上去(注意方向性)最後在外箱貼上LBL-0039-14C








# 啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

版本：A1

附件一

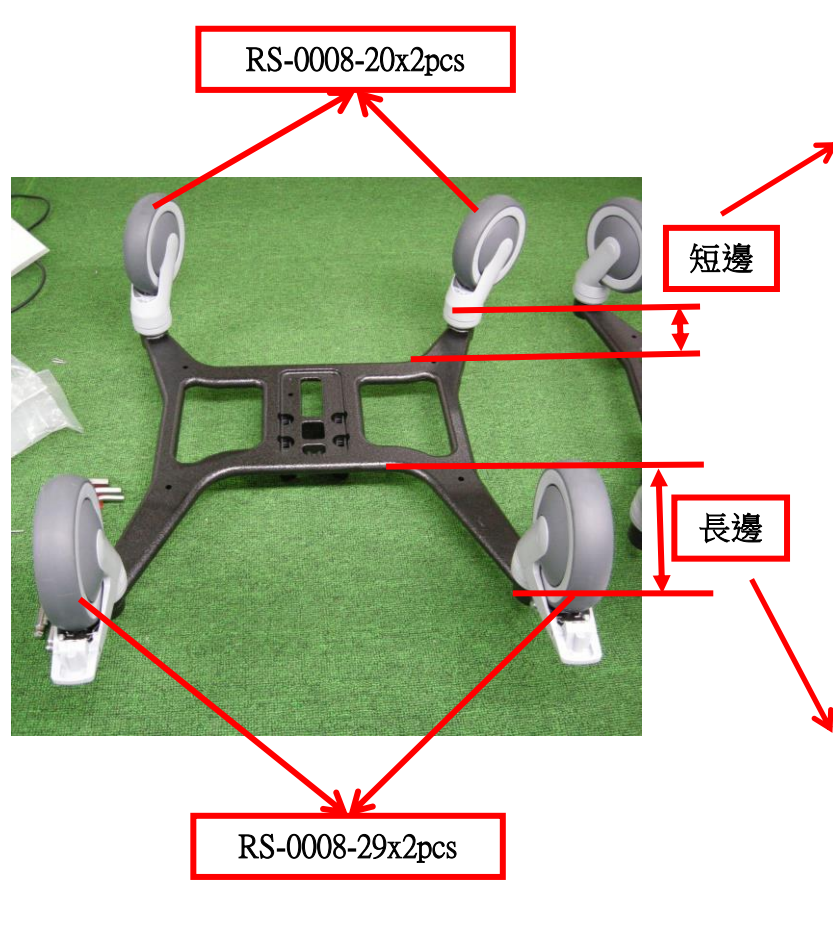

鎖付磅數是否為100in-lbs



鎖付磅數是否為100in-lbs



RS0002H2A是否正確穿入  
GEM0010M19A



ST-0018-47x4pcs鎖付磅數是  
否為30in-lbs.



將組裝好的成品使用平台作平  
整度檢驗，使用0.02"厚薄規檢  
驗RS-0008-29、RS-0008-20不可  
穿過其中任何一輪





# 啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

版本：A1


附件二



GEM0010M1B-26300依啟鑫五金壓鑄檢驗規範檢驗外觀



FST-0300-01x1pcs鎖付磅數是  
否為 5in-lbs

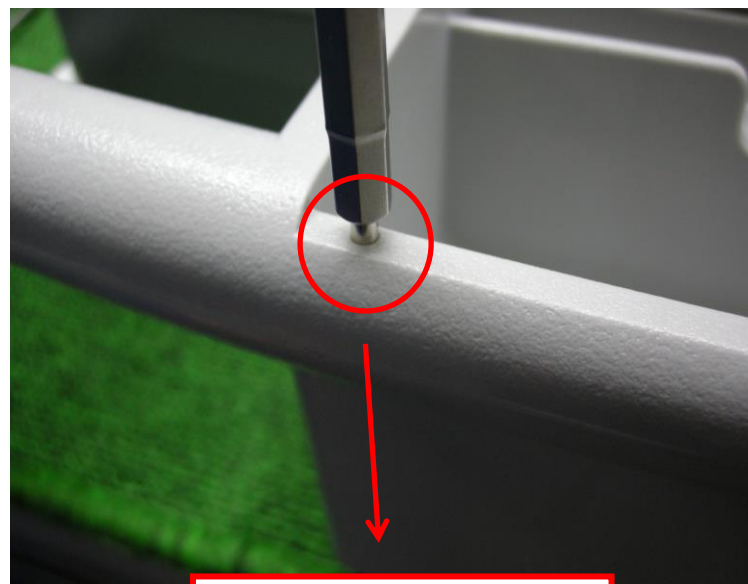

HDW-0033-01x2pcs是否有壓  
入齊平



檢驗GEM00010P10A使用FST-0011-17x4pcs  
鎖付磅數是否為 30in-lbs



檢驗GEM0010P2A、GEM0010P3A使用FST-  
0011-17x4pcs鎖付磅數是否為 30in-lbs



# 啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

版本：A1

附件三





GEM00010P10A與GEM0010P1D組裝  
完需使用0.03"厚薄規檢驗間隙



GEM0010P4A x2pcs

GEM0010P14A x1pcs

HDW-0011-75 x2pcs

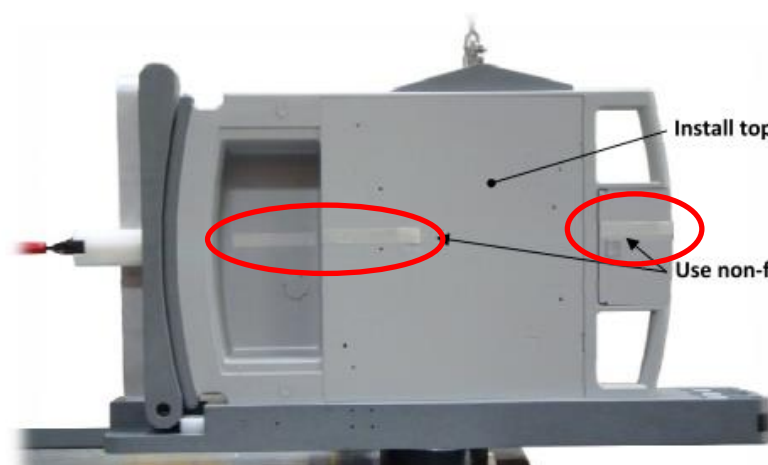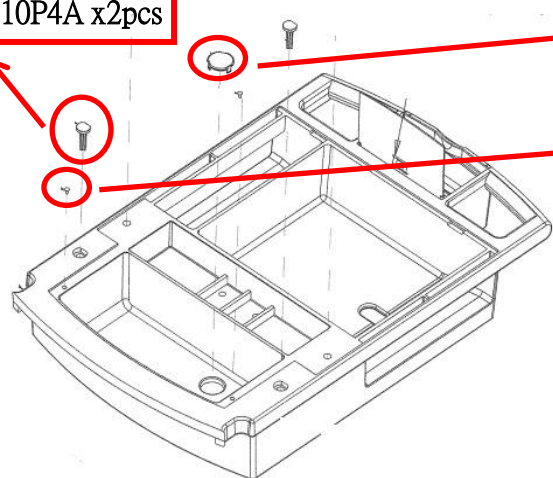

Install top Housing plate

Use non-filament tape to hold top cover  
and flip up door.

使用纖維膠帶黏貼GEM0010S3A、  
GEM0010S1A至GEM0010P1D





# 啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

版本：A1

## 附件四



GEM-0010-41B BAG00



HDW-0027-02 x2pcs



FST-0028-41 x4pcs



HDW-0027-03x4pcs



FST-0028-56x4pcs

GE Healthcare

Modular MAC™ Trolley  
Assembly Instructions  
2056914-002 Revision C

- Инструкции за монтаж
- 組裝說明
- Upute o sastavljanju
- Montážni návod
- Monteringsanvisning
- Montagehandleiding
- Monteerimisjuhend
- Kokoamisohjeet
- Notice d'assemblage
- Montageanleitung
- Önyiesztes utasítás
- Istruzioni per il montaggio
- アセンブリ命令
- 組立 說明
- Montāžas instrukcijas
- Sumontavimo instrukcijos
- Monteringsanvisning
- Instrukcja montażu
- Instruções de montagem
- Instrucțiuni de montare
- Инструкция по монтажу
- Упутство за montažu
- Montážny návod
- Instrucciones de montaje
- Monteringsanvisningar
- Montaj Talimatları



MAC Modular Trolley  
© 2011-2013 General Electric Company.  
All Rights Reserved.

2056914-002\_C x1pcs




WS0001K8A x1pcs



FST-0013-87 x2pcs



FST-0051-25 x4pcs

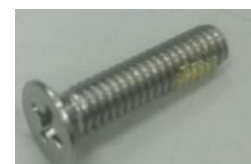

FST-0007-34 x2pcs




# 啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

版本：A1


Pyramids QC Final Inspection Standard

## 附件五

需檢驗是否為LBL-0002-224C 是否貼至GEM0010P1D背面指定位置。

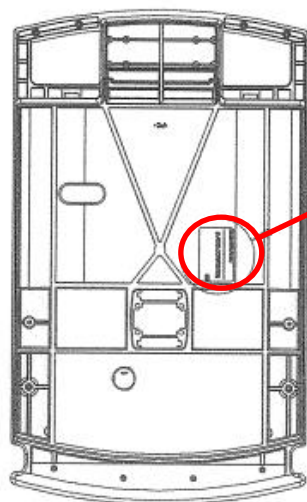

LBL-0002-224C

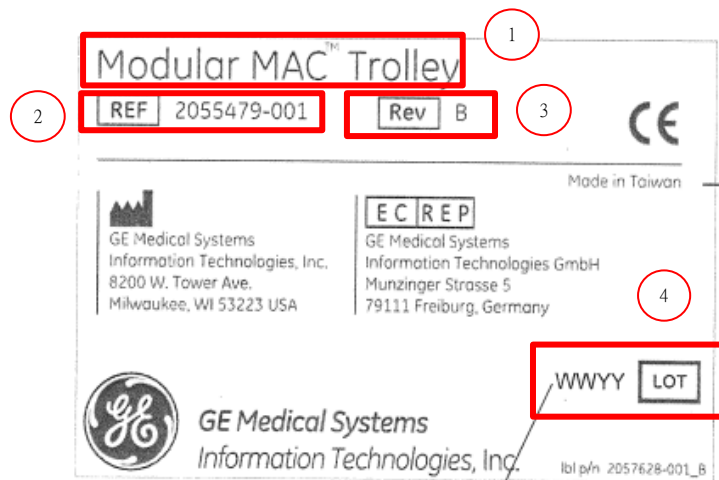


LBL-0002-224C

需檢驗LBL-0002-224C是否正確。


細節如下：

- 1.品名需與客戶文件核對
- 2.REF為2057628-001
3. 版本Rev B
- 4.WWYY需與外箱標籤核對為一致

檢驗外箱標籤是否為LBL-0039-14C 是否正確。

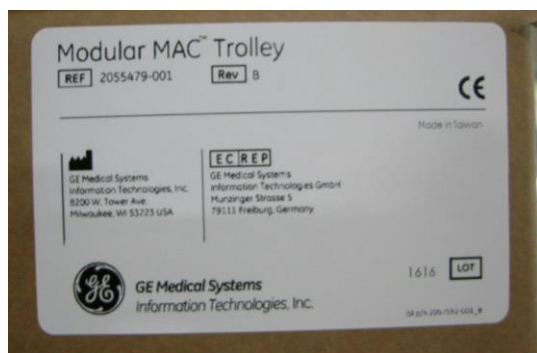

LBL-0039-14C

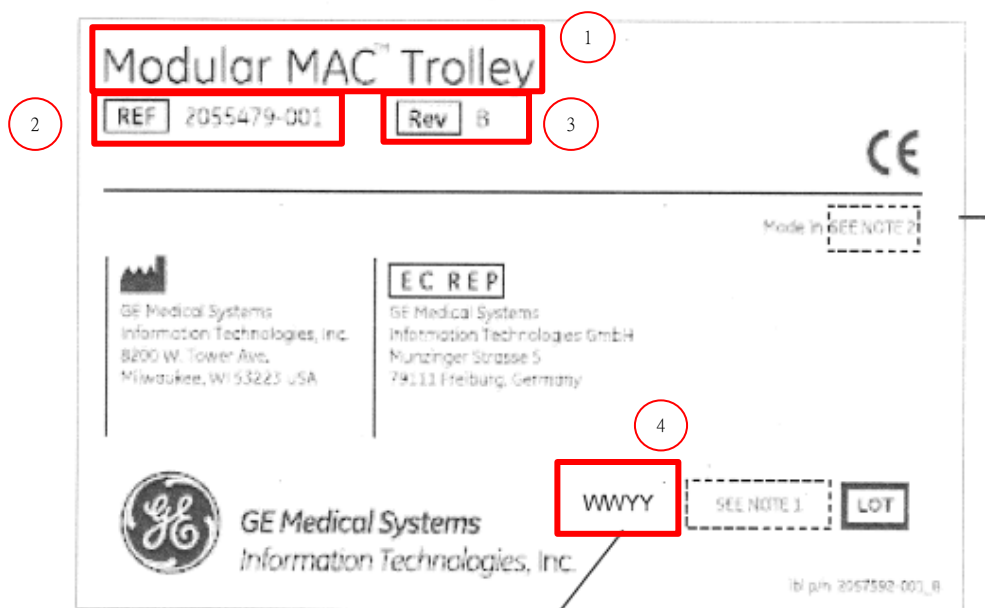

LBL-0039-14C

需檢驗LBL-0039-14C是否正確。

細節如下：

- 1.品名需與客戶文件核對
- 2.REF為2057592-001
3. 版本Rev B
- 4.WWYY需與LBL-0002-224C一致



# 啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

客訴問題記錄